




SLED700+700 LED OT/OR Light

- Excellent Material
- Long Life and Energy-saving
- Latest Technology
- Shadowless Effect
- Cold Light Effect

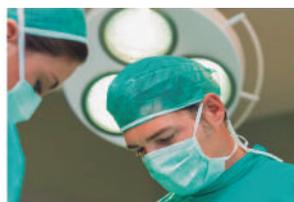

Features:

Excellent Material

The arm, the electronic commutator, the LED bulb and the power system are all famous and popular brand

Long Life and Energy

The LED bulb can be used for 80,000 hours, which is 50 times longer than halogen lamp, no need to replace the LED bulb within 15 years, low maintenance cost and economical.

Latest Technology

With CAD/CAM technology, together with Lens technology and optical coating material, the light depth can be 1200 mm;

With special PC material from America, the light can be more soft and the system more safe and reliable;

With hydraulic design dome, the interference of vertical laminar flow and visual disturbance in the OT will be in the minimized level;

The dome is beautiful and smooth and made of Aviation-level aluminum alloy, with the surface covered with a protective layer of anti-bacteria material, plus the water-proof design, and is fully catering to the OT application needs and requirements.

Shadowless Effect

Con la combinación de la luz LED y con la precisión de la computadora puede determinar la posición para alcanzar el mejor efecto sin sombra. Cuenta con un alto rendimiento de brillo, profundidad y espacio de alcance.

Cold Light Effect

Using the new LED cold light as the operation lighting, it will not produce infrared; it hardly has any temperature rising on the doctor's head and surgical field.

SLED700+700 professional LED operation light parameters and specifications

Item	700 + 700
Illuminance (LUX)	160,000 / 160,000
Color temperature choice (Kelvin)	3,700 - 5,000
Color rendering index (CRI)	90
Light adjust range	1% - 100%
Illumination depth (mm)	1,200
Diameter of spot (mm)	200
LED Lifespan (hours)	≥50,000
Input power	100-240VAC 50/60Hz
Temperature rise	<1%
Number of individual LED per dome	80/80

SANTAMED

ZHENGZHOU SANTA MEDICAL CO.,LTD

Room 301 Building-6, Jincheng Time Square, Jinshui Zone, Zhengzhou450000 Henan Province PR,China

+ 86-177 19820906

sales@santamedhk.com; cloverye@santamedhk.com

www.santamedhk.com